

ONCE WEEKLY

MEPTIDE
(TIRZEPATIDE)



INSTRUCTIONS MANUAL

Quick Pen


PRE-FILLED PEN AUTOINJECTOR

Wash your hands with soap and Water

Step 1 Check the pen

پہلا مرحلہ: پین کی جانچ کریں

- 1 Check the pen label to make sure you have the right medicine and dose, and that it is not expired.
- 2 Make sure the pen is not damaged and is locked.
- 3 Make sure the medicine:
 - is not frozen
 - is colorless to slightly yellow
 - is not cloudy
 - does not have particles

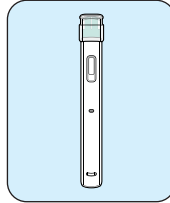

1 صحیح دوا اور خوراک کی تصدیق کیلئے پین کا لیبل چیک کریں اور یہ بھی کہ دوا کی معیاداتی ہو۔

2 اس بات کو یقینی بنائیں کہ پین خراب نہ ہو اور بند ہو۔

3 اس بات کو یقینی بنائیں کہ دوا:

• میں گدلا یا نہ ہو

• میں کوئی ذرات موجود نہ ہوں۔



• منجمد نہ ہو

• بے رنگ یا ہلکی پیلی ہو

Step 2 Choose your injection site

دوسرا مرحلہ: انجکشن لگانے کی جگہ کا انتخاب کریں


- 1 MEPTIDE can be injected under the skin (subcutaneously) of your stomach area (abdomen) or thighs, and with the help of someone else, in the back of the upper arm.
- 2 Change (rotate) your injection site each week.
- 3 You may use the same area of your body but be sure to choose a different injection site in that area.

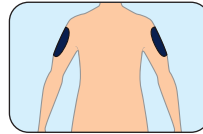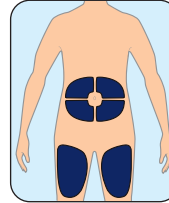

1 مچھانڈ کو پیٹ کے ارد گرد یا رانوں پر یا کسی اور کی مدد سے بازو کے پچھلے اوپری حصے پر زیر جلد لگایا جاسکتا ہے۔

2 انجکشن لگانے کی جگہ ہر ہفتے تبدیل کرتے رہیں۔


3 آپ جسم کے ایک ہی حصے پر انجکشن لگا سکتے ہیں مگر ہر انجکشن کی جگہ تبدیل کریں۔

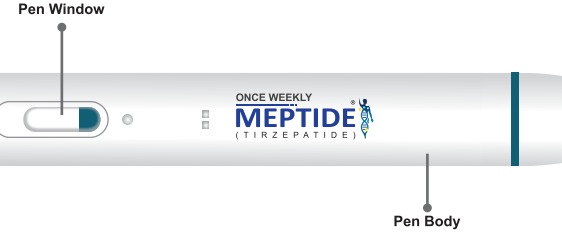

Step 3 Remove the pen cap

تیسرا مرحلہ: پین کے کیپ کو ہٹائیں

- 1 Pull the pen cap straight off your pen.
- 2 The needle is hidden, so you do not have to see or handle it.
- 3 Be careful not to push down on the needle cover to avoid needle stick injuries.

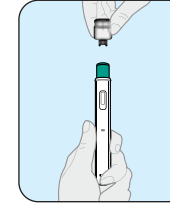

1 پین کے کیپ کو پین سے سیدھا ہٹائیں۔


2 سوئی پین کے اندر موجود ہے، اس لیے اسے دیکھنے یا چھونے سے گریز کریں۔

3 سوئی کی چوٹ سے بچنے کیلئے احتیاط کریں کہ سوئی کے کوکڑھونچ نہ کیا جائے۔

Step 4 Inject your dose

چوتھا مرحلہ: انجکشن لگانے کا طریقہ

- 1 Push the pen (needle cover sleeve) firmly against your skin and keep applying pressure.
- 2 Listen for click sound during the injection and hold for approximately 10-15 seconds.
- 3 You will know your injection is complete when the plunger rod entirely covers the pen window.
- 4 After using the injection, reattach the pen cap.
- 5 Dispose of the used pen.

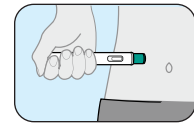

- 1 پین کی سوئی کے حفاظتی کوارا پنی جلد کے مخالف مضبوطی سے دبائیں اور باؤ کو مسلسل برقرار رکھیں۔
- 2 انجکشن لگانے کے دوران ٹھٹھکی کی آواز سنیں اور تقریباً ۱۰-۱۵ سیکنڈ تک انتظار کریں۔
- 3 جب پین کی وڈو پر پلنجر راکمپل نظر آجائے تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کا انجکشن مکمل کیا گیا ہے۔
- 4 انجکشن لگانے کے بعد پین کے کیپ کو واپس پین پر لگا دیں۔
- 5 استعمال شدہ پین کو ضائع کر دیں۔

Important Instructions for Use

- Change (rotate) your injection site within the area you choose for each dose to reduce your risk of getting lipodystrophy (pits in skin or thickened skin) and localized cutaneous amyloidosis (skin with lumps) at the injection sites.
- Do not inject where the skin is tender, bruised, scaly or hard, or into scars or damaged skin.
- If you see blood after you take the needle out of your skin, press the injection site lightly. Do not rub the area.
- Do not freeze (if frozen, do not use the pen).
- Do not inject where the skin has pits, is thickened, or has lumps.

استعمال کے لئے اہم ہدایات

- اپنی انجکشن کی جگہ ہر بار تبدیل کریں تاکہ انجکشن کی جگہوں پر جلد میں گڑھے، ٹھٹھکی یا جلد موٹی ہونے کے خطرے کو کم کیا جاسکے۔
- جہاں جلد نرم ہو، چوٹ لگی ہو، کھر دہری یا سخت ہو، داغ ہو یا جلد خراب ہو وہاں انجکشن نہ لگائیں۔
- اگر جلد سے سوئی نکالنے کے بعد خون نظر آئے تو انجکشن کی جگہ کو ہلکے سے دبائیں، جگہ کو نہ رگڑیں۔
- جلد میں جہاں گڑھے، ٹھٹھکی یا جلد موٹی ہو وہاں انجکشن نہ لگائیں۔
- دوا کو جمہ نہ ہونے سے بچائیں (اگر دوا جمہ ہو جائے تو استعمال نہ کریں)۔